


Alle tandheelkundige materialen

iBOND Universal is compatibel met licht-, dual- en zelfuithardende materialen, zonder de noodzaak van een dual-cure activator. Dat betekent een betrouwbare hechtsterkte voor alle gangbare soorten restauraties - of u nu werkt met composietcementen, stompopbouwmaterialen of dat u gebruik maakt van zelfuithardende / duaaluithardende composieten en compomeren voor het cementeren van indirecte restauraties.

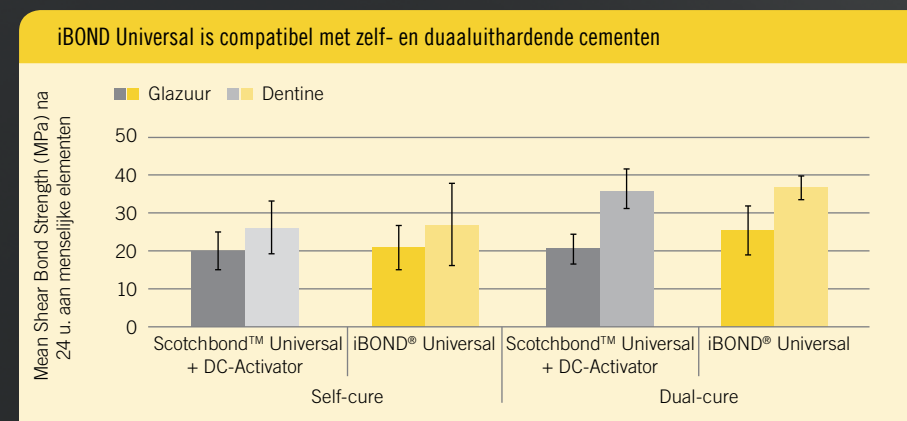

Bron: Kulzer R&D, Duitsland, 2014

Alle indicaties

Ongeacht het materiaal, ongeacht de situatie van de patiënt, één flacon iBOND Universal leidt u door indicaties van directe en indirecte restauraties met verbazingwekkende hechting. Veilig en gemakkelijk.

- Bonding van directe restauraties voor alle caviteitsklassen (Black) met licht-, dual- of zelfuithardende composieten / compomeren op basis van methacrylaat.
- Bonden van licht-, dual- of zelfuithardende stompopbouwmaterialen.
- Sealen van overgevoelige delen van het element.
- Sealen van caviteiten vóór amalgaamrestauraties.
- Bonden van fissuur sealants.
- Sealen van caviteiten en opbouwpreparaties vóór tijdelijk cementeren van indirecte restauraties (met de techniek voor onmiddellijke dentine sealing).
- Cementeren van indirecte restauraties in combinatie met een licht-, dual- of zelfuithardend adhesief composietcement.
- Intraorale reparatie van composiet- en compomeerrestauraties, porselein op metaal evenals volledig keramische restauraties en restauraties van metaal.

Intraorale reparaties

Ondersteun uw patiënten door intra-oraal fractures en chippings te herstellen in plaats van dure vervangingen. Effectief, economisch en tijdens één afspraak.

- Restauraties met zirkonium, legeringen (edel en niet-edel) en composieten kunnen gemakkelijk en snel gerepareerd worden met één laag.
- Om silicaatkeramiek te bonden en repareren, appliceert u eerst iBOND Ceramic Primer - voor een uitstekende hechtsterkte.

iBOND® Universal: Assortiment.

iBOND Universal Bottle Refill
1 x 4 ml flacon iBOND Universal
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061411

iBOND Universal Bottle Value Pack
3 x 4 ml flacons iBOND Universal
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061412

iBOND Universal Bottle Intro Kit
1 x 4 ml flacon iBOND Universal
1 x 4 ml flacon iBOND
Ceramic Primer
1 x 2.5 ml spuitje iBOND Etch 35 Gel
25 applicatietips groen (slim)
25 applicatietips rood (regular)
10 etscanulas
Mengschaaltje
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061413

iBOND Universal Single Dose Value Pack
100 single doses iBOND Universal
50 applicatietips groen (slim)
50 applicatietips rood (regular)
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061419

iBOND Universal Single Dose Intro Kit
50 single doses iBOND Universal
1 x 4 ml flacon iBOND
Ceramic Primer
1 x 2.5 ml spuitje iBOND Etch 35 Gel
25 applicatietips groen (slim)
25 applicatietips rood (regular)
10 etscanulas
Geïllustreerde werkkaart
Artikelnr. 66061420

iBOND Ceramic Primer
1 x 4 ml flacon iBOND
Ceramic Primer
Artikelnr. 66061416



Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com

All-Bond Universal® is a trademark of BISCO Inc. • OptiBond™ FL is a trademark of Kerr Corporation • Scotchbond™ Universal is a trademark of 3M Company

iBOND® Universal
Hecht. Eenvoudig. Alles.

Giving a hand to oral health.



iBOND® Universal

Bonden met vertrouwen.

Wat verwacht u van een universele bonding?

- Duurzame en betrouwbare hechtsterkte.
- Veilige en gemakkelijke verwerking.
- Geschikt voor alle bondingtechnieken.
- Toepasbaarheid voor alle tandheelkundige materialen en alle indicaties.
- Korte uithardingstijd.
- Geen dual-cure activator nodig.
- Verminderde techniekgevoeligheid.

**Dit is hoe wij universele bonding definiëren.
En dat is wat u krijgt met iBOND Universal.**

Gemakkelijke verwerking

iBOND Universal vertegenwoordigt de kwaliteit van een universele bonding door breed en gemakkelijk toepasbaar te zijn. Voor meer flexibiliteit bij iedere caviteitsgrootte, bieden wij applicatietips in twee maten. iBOND Universal kan bewaard worden op kamertemperatuur, bewaren in de koelkast is hierdoor verleden tijd.

Vanaf de eerste toepassing van een homogene adhesieve laag, zult u de uitstekende verwerkingseigenschappen van iBOND Universal ontdekken - én profiteren van een duurzame en betrouwbare hechtsterkte.

Spatzuiver

Exclusief van Kulzer: Met ons unieke drop control systeem, kunt u de exacte hoeveelheid adhesief doseren die u nodig heeft. De revolutionaire dispenser is zuiniger en zorgt voor een efficiënte, gecontroleerde dosering van het adhesief. Het aantal druppels stijgt hiermee naar maar liefst 220 per flacon.

**iBOND® Universal**

Intelligente formule – Direct bonding succes.

Direct bonding success

De intelligente nieuwe formule van iBOND Universal bevat MDP en biedt een directe en betrouwbare hechting. Wetenschappers uit Europa en Japan hebben samengewerkt om u te voorzien van een adhesief dat het beste van twee werelden combineert. De verschillende onderdelen werken perfect samen en zorgen voor:


- Effectief etsen.
- Goede penetratie in de dentinetubuli.
- Duurzame en stabiele hechting.
- Optimale hechting aan keramiek, metaal en tandoppervlak.

Ons unieke “moisture control system”

Aceton fungeert als een waterverdrijver en ondersteunt de snelle verdamping van water. Tijdens het droogblazen wordt het water gescheiden van de monomeer en verbetert de werkzaamheid van het adhesief. Minder restwater in de hybride laag is een belangrijke factor voor een stabiele laag.

U profiteert van dit intelligente systeem door eenvoudiger droogblazen, verminderde techniekgevoeligheid en een homogene adhesieve laag. Onze intelligente formule zorgt voor een stabiele hechting, wat essentieel is voor een lange levensduur van de restauraties.

Moisture control system: Aceton ondersteunt snelle verdamping perfect!

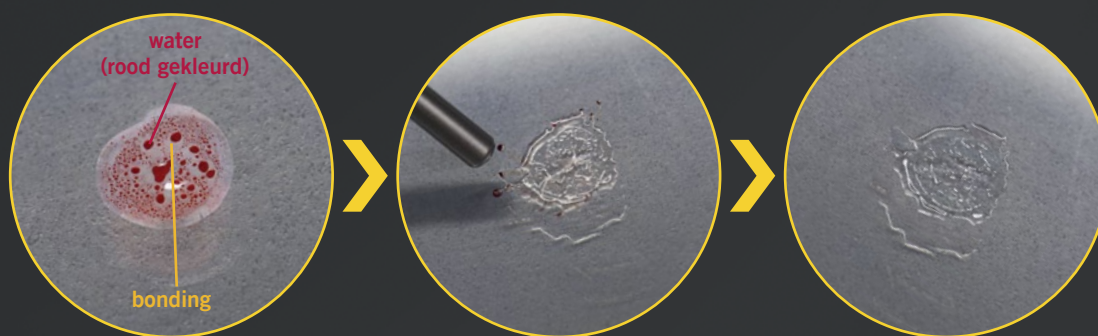
**iBOND® Universal**

Bonden op z'n gemakkelijkst.

Multi-techniek geschikt


Met iBOND Universal krijgt u altijd een betrouwbare hechtsterkte, ongeacht uw voorkeursmethode:

- Total-etch – Met apart etsen van glazuur en dentine. (1)
- Selective-etch – Met apart etsen van glazuur. (2)
- Self-etch – Apart etsen niet nodig. (3)

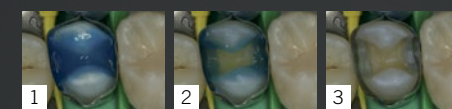


U kunt nog steeds met uw favoriete bondingtechniek werken, omdat iBOND Universal uw persoonlijke voorkeur respecteert. Bovendien profiteert u van een korte uithardingstijd van slechts 10 seconden.

Onze studies hebben bewezen dat de betrouwbare hechtsterkte van iBOND Universal werkt: ... met de techniek van uw keuze

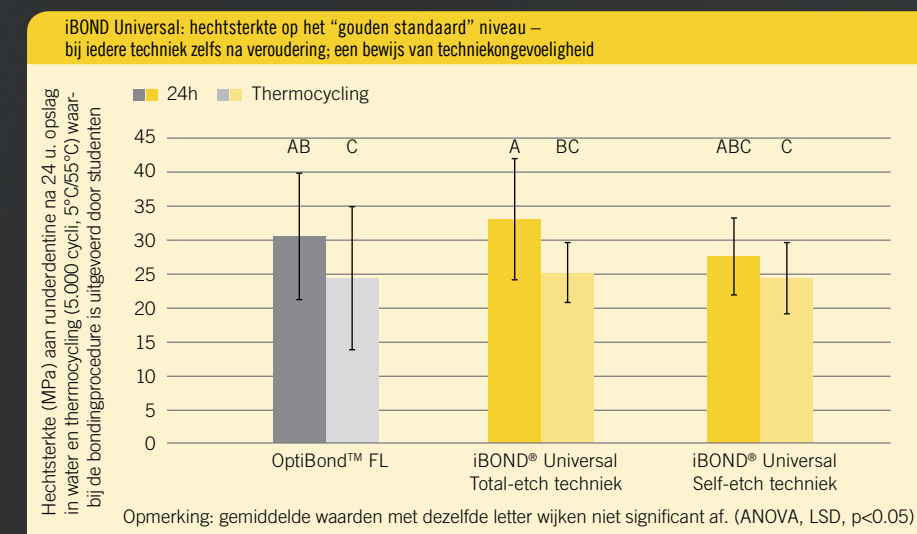

Bron:
Universiteit van Mainz &
Kulzer R&D,
Duitsland, 2014

.. op alle oppervlakken

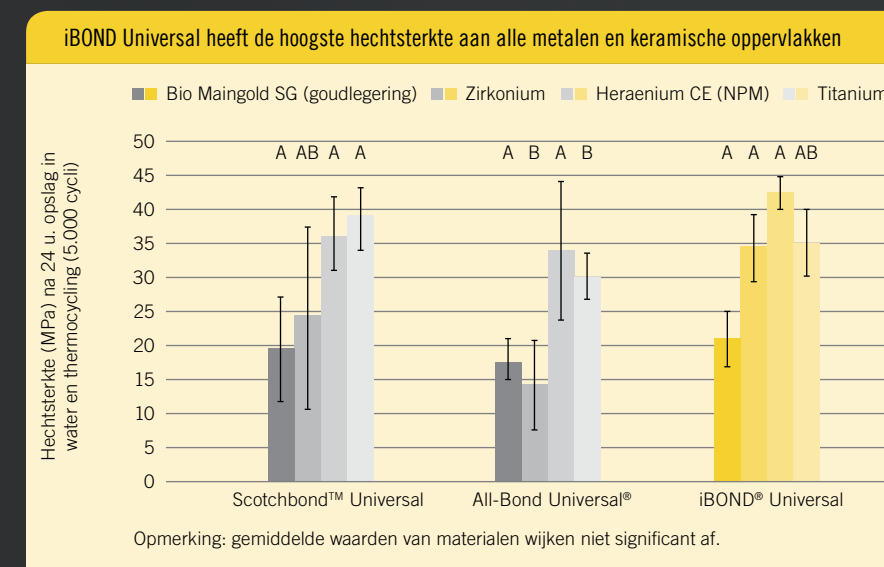

Bron:
Kulzer R&D,
Duitsland, 2014